



GIMA

**GUIDA RAPIDA DI PRONTO SOCCORSO
PALLONE RIANIMATORE PORTATILE**

***PRENOSNÝ RESUSCITAČNÝ KUFŘÍK
ZÁKLADNÁ PRÍRUČKA PRVEJ POMOCI***

**BALLON DE RÉANIMATION PORTATIF
GUIDE RAPIDE DE PREMIER SECOURS**

***BALÓN REANIMADOR PORTÁTIL
GUÍA RÁPIDA DE URGENCIAS***

**BALÃO DE REANIMAÇÃO PORTÁVEL
GUIA RÁPIDA DE PRONTO SOCORRO**

öiĩñçöi ìðáëiíé áíáÆùíãííçóçó ãñpãĩñiò iäçãüò
ðñpôùí âiçèâéþí

| w{A a{ç a c|} a | iBi} ©Zy

§{¥¾A uBlaÃ{ m!Za |!}X


GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403 E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056 E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com




Prenosný resuscitačný kufrík Základná príručka prvej pomoci

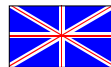


1 – Skontrolujte, či je pacient ďaleko od zdroja nebezpečenstva: dym, oheň, voda, plyn, toxické výpary, elektrické káble pod napätím atď..

2 – Skontrolujte, či dýchacie cesty nie sú upchaté. V prípade, že je prítomná voda sliny alebo cudzie telesá, uvoľnite ich pomocou ústneho rouбіka, ktorý umiestnite medzi zuby pacienta, aby vás neboleli ruky.

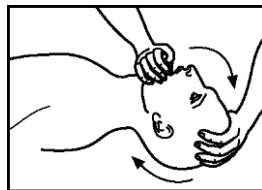


3 – Položte hlavu pacienta dozadu. Za týmto účelom zatlačte čeluste nahor, aby ste natiahli krk a otvorili dýchacie cesty.

4 – Skontrolujte, či je schopný dýchať a či sa jeho farba zlepšuje. Ak je schopný dýchať, položte ho tvárou nadol do poohy podobnej Kóme so zdvihnutými nohami (na naklonenej rovine alebo o niečo Oprený) a hlavou nadol. Zavolajte lekára alebo sanitku. Ak nie je Ak nie je schopný dýchať, je potrebné umelé dýchanie nonstop, kým

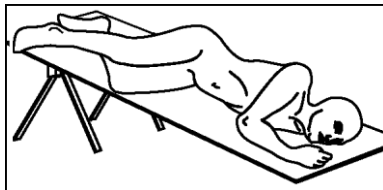

Pacient sám nedýcha alebo kým nepríde doktor.



5 – Umelé dýchanie pomocou vrečka Gima pritlačte masku na tvár pacienta zakryte ústa a nos. Držte hlavu úplne zaklonenú dozadu a tou istou rukou ktorá drží masku, zatlačte čeluste dopredu. Dôkladne stláčajte vak a skontrolujte, či sa hrudník rozširuje. Aby ste udržali dýchacie cesty otvorené, môžete použiť jednu z kanýľ dodaných s vakom a umiestniť ju pod masku. Dávajte pozor, aby jazyk neblokoval hrdlo. V tomto prípade použite vhodné kliešte na vytiahnutie Smerom von.

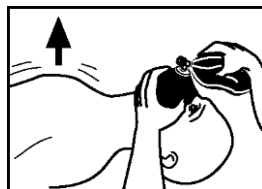

6 – Okamžite uvoľnite tlak vaku a počkajte, kým sa hrudník nevyprázdni.. Operáciu opakujte 10-20 krát za minútu. Ak máte kdispozícii nejaký kyslík Privádzajte ho z príslušného konektora v množstve nepresahujúcom 2-4 litre Za minútu.

Skontrolujte prítomnosť bušenia srdca na krku pacienta. Ak je prítomný tlkot srdca: Pokračujte v umelom dýchaní, kým nebude dýchať sám.

Ak tlkot srdca nie je prítomný: Srdce pacienta sa zastavilo. Konajte okamžite, pretože po 4 minútach môže nedostatok kyslíka spôsobiť poškodenie mozgu.

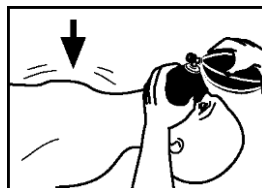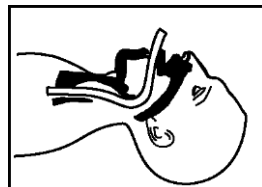

7 – Pri zástave srdca je potrebné aplikovať vonkajšiu masáž srdca.

Posuňte ruky nadol k hrudníku na úrovni srdca, stlačte 60-70 krát za minútu.

Počas kompresie skontrolujte pulzáciu krku. VAROVANIE: deti vyžadujú oveľa nižší tlak a používajú iba jednu ruku. Každých 5-8 stlačení vykoná úder pri umelom dýchaní. Pokračujte v stláčaní kým nebude pulzácia krku dobre Definovaná a najmenej 1 hodunu. Dokonca aj vtedy, keď srdce pacienta opäť Bije môže byť potrebné pokračovať v umelom dýchaní po dlhú dobu.

